

Provox Life LaryTube es un tubo suave de silicona diseñado para mantener la apertura del estoma durante la rehabilitación pulmonar con un Provox Life HME.

Provox Life LaryTube mantiene la abertura de su estoma y le permite usar un intercambiador de calor y humedad (HME). Es una opción que se usa frecuentemente después de la operación de laringectomía total y puede usarse a largo plazo para quienes necesiten un mayor apoyo estomatológico. Su clínico determinará si debe utilizar un LaryTube y qué tamaño y tipo sería el más adecuado para usted.

Provox Life LaryTube Standard

> Estándar



Provox Life LaryTube Fenestrated

> Fenestrado



Las fenestraciones son orificios en el LaryTube que permiten la fonación (cuando se usa con una prótesis de voz).

Provox Life LaryTube with Ring

> Estándar con anillo



Provox Life LaryTube Fenestrated with Ring

> Fenestrado con anillo



El LaryTube Standard y LaryTube Fenestrated se pueden asegurar con:



Provox TubeHolder




Provox LaryClip



Freevent Neckband

El LaryTube with Ring permite un sellado hermético con un adhesivo, mientras se sigue usando un LaryTube para mantener el apoyo estomatológico.

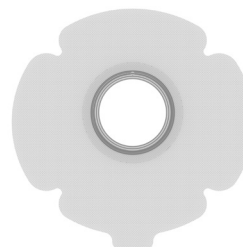

Consejo para el uso del LaryTube:

Si siente que el LaryTube se ha vuelto demasiado ajustado, o difícil de insertar en el estoma, es posible que necesite un tamaño diferente. Comuníquese con su clínico si presenta cambios en el tamaño o irritación por el LaryTube.

Consejo para ducharse:



Provox Life LaryTube es compatible con Provox Life Shower. Solo puede usar Shower con su LaryTube si su LaryTube tiene un ajuste firme y seguro dentro del estoma.



Provox Life Shower

Su clínico puede ayudarlo a determinar qué Provox Life LaryTube es el mejor para usted.

1 Inserte

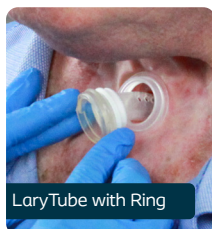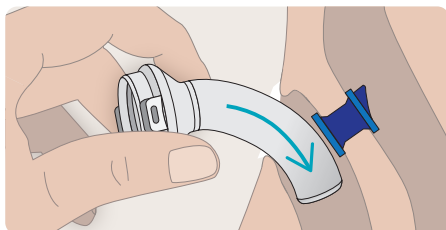

Inserte el LaryTube en el estoma después de humedecerlo ligeramente con agua o lubricante soluble en agua.

LaryTube: Sujete al LaryClip, TubeHolder o NeckBand para mantener el LaryTube en su lugar.

LaryTube con anillo: Sujete al Provox Life Adhesive alineando el anillo inferior del adhesivo con el borde inferior de su estoma. Luego coloque el LaryTube with Ring a través del centro del adhesivo hasta que sienta un ajuste firme y estable.

2 Use




Sujete Provox Life HME al LaryTube o al LaryTube with Ring.

Use su Provox Life LaryTube según las instrucciones de su clínico.

Si tiene dificultad para acostumbrarse a usar su LaryTube, úselo durante períodos cortos de tiempo y aumente gradualmente la duración a medida que mejore la tolerancia. Consulte a su médico clínico si continúa teniendo dificultades.

3 Quitar

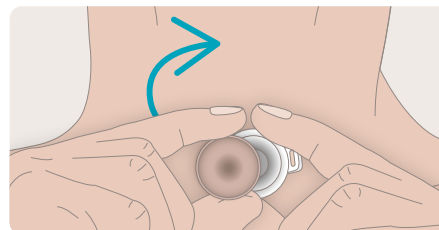

Para retirar el HME: Sujete el LaryTube en su lugar con una mano. Con la otra mano, sujete el Provox Life HME y gírelo suavemente, levantando el HME desde un borde, como si abriera una puerta.



Para retirar el LaryTube: Desprenda el LaryTube del LaryClip, TubeHolder o NeckBand y retírelo suavemente del estoma.



Para retirar el LaryTube with Ring: Estabilice el adhesivo con una mano y retire suavemente el LaryTube with Ring, para no despegar el adhesivo de la piel.

4 Limpiar



Limpie el LaryTube y el LaryTube with Ring con el Provox TubeBrush del tamaño adecuado al menos una vez al día o si se obstruye con secreciones.

Se puede usar Provox Brush para limpiar los orificios de un LaryTube fenestrado.

Limpie y desinfecte el LaryTube según las instrucciones de uso.




Provox TubeBrush



Provox Brush

Precaución: Si también tiene una prótesis de voz, evite enganchar la prótesis de voz con el extremo del LaryTube durante la colocación y la extracción, ya que esto puede causar un desplazamiento accidental.

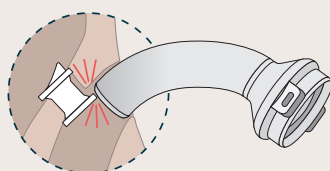

Este texto no reemplaza ni representa el contenido completo de las instrucciones de uso (IFU) ni la información del proveedor que receta para los productos en este texto. Por lo tanto, antes de recetar o de usar cualquiera de los productos incluidos en este texto, repase todo el contenido de las IFU correspondientes o la información del proveedor que receta. Para consultar las IFU, visite www.atosmedical.us

Atos Medical Inc

5000 South Towne Drive, Suite 200, New Berlin, WI 53151-7956 USA | 1 800 217 0025 | info.us@atosmedical.com | www.atosmedical.us

Atos and the Atos logo are trademarks of Coloplast A/S. ©2026-07 Coloplast A/S. All rights reserved. MC-2692ES, 071726