


Los adhesivos **Provox Life Adhesives** están diseñados para un mejor ajuste y mayor comodidad. Incluyen opciones adecuadas para una variedad de tipos de piel y contornos de estoma, para que pueda encontrar la que sea mejor para usted.

Pasos sencillos para **APLICAR** el adhesivo Provox Life Adhesive.

### 1 Piel limpia

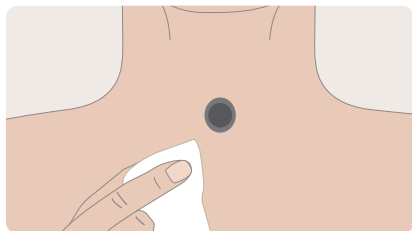


**Limpie** la piel alrededor del estoma con una toallita de limpieza Provox Cleaning Towel o con agua y un jabón suave. Deje secar.

Provox Cleaning Towel



**Consejo:** Afeite todo el pelo alrededor del área de aplicación.

### 2 Prepara la piel

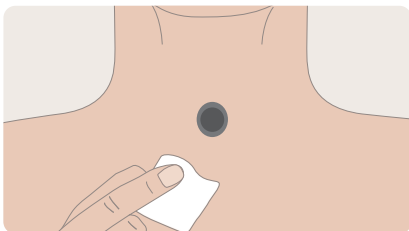

**Aplique** la barrera cutánea Provox Skin Barrier. Deje secar.

**NO USES** la barrera cutánea al aplicar el adhesivo Provox Life Night Adhesive.

Provox Skin Barrier




### 3 Caliente el adhesivo




Cuando use el adhesivo Provox Life Sensitive Adhesive, **frote** el adhesivo entre sus manos para calentarlo.

### 4 Quitar forro

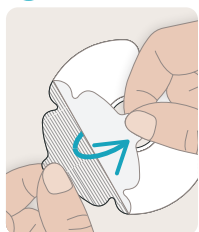


Sensitive y Standard Adhesive

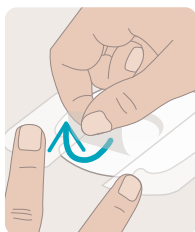

Night y Stability Adhesive


**Quite** el papel protector.

### 5 Colocar adhesivo

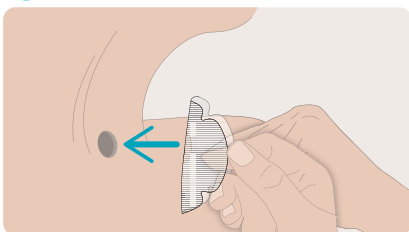

**Ponga** el adhesivo. Alinee el anillo inferior del adhesivo con el labio inferior de su estoma.

### 6 Masajee el adhesivo suavemente

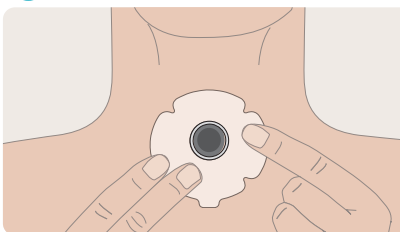

**Masajee** el adhesivo sobre su piel. Comience desde el centro y avance hacia afuera. Asegúrese de que no queden espacios ni arrugas.



### Consejos para aplicar un adhesivo:

- Tocar la capa pegajosa con los dedos puede reducir la adherencia.
- Si necesita una adhesión más fuerte, use una toallita Skin Tac Wipe o el pegamento de silicona Provox Silicone Glue con moderación.
- Ponga el adhesivo con el cuello en posición neutra.



Skin Tac Wipe




Provox Silicone Glue

### Consejos para un sellado hermético:

- Deje que el adhesivo se adhiera a su piel antes de hablar. Para obtener mejores resultados, espere:  
Sensitive = 15 minutos  
Standard y Stability = 1 hora
- Use siempre dos dedos para mantener el adhesivo en su lugar al quitar el HME.
- Quite el HME del adhesivo cuando comience a toser.
- Después de toser, quite con cuidado la mucosidad de la piel.
- Hablar con demasiada fuerza puede provocar que el sello se afloje.

## Pasos sencillos para QUITAR el adhesivo Provox Life Adhesive.

### 1 Quitar adhesivo

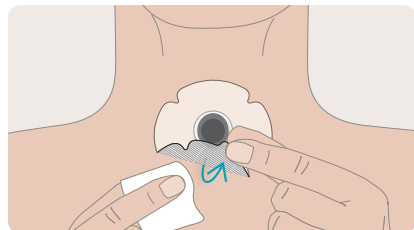

Quite el adhesivo lentamente, sosteniendo suavemente la piel mientras se despeg.

Para el adhesivo Provox Life **Standard** Adhesive y el adhesivo Provox Life **Stability** Adhesive, primero aplique el removedor de adhesivo Provox Adhesive Remover sobre el adhesivo.

Luego levante la lengüeta con cuidado y agregue más debajo del adhesivo.

Para **Sensitive**, aplique el removedor de adhesivo o agua debajo del adhesivo.

El adhesivo **Night** Adhesive debe quitarse únicamente con agua.



Provox Adhesive Remover

### Consejos para minimizar la irritación de la piel (p. ej. enrojecimiento):

- Use toallitas de barrera cutánea antes de aplicar el adhesivo.
- Cambie su adhesivo periódicamente.
- NO quite el adhesivo sin removedor de adhesivo (Standard y Stability) o agua (Sensitive y Night).

Escanea aquí para ver nuestros videos CareTip con consejos y trucos para usar adhesivos.



[www.atosmedical.us/resources/spanish-resources](http://www.atosmedical.us/resources/spanish-resources)

## Guía para adhesivos Provox Life Adhesives


### Provox Life Sensitive Adhesive

El Sensitive Adhesive es un adhesivo apto para la piel para todos los pacientes. Da un buen sellado.



### Provox Life Standard Adhesive

El Standard Adhesive es un adhesivo fuerte y flexible para pacientes con piel sana.

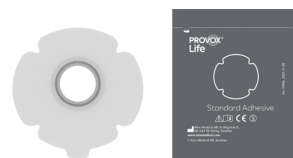

### Provox Life Night Adhesive

El Night Adhesive es un adhesivo calmante y confortable para pacientes con piel irritada o lastimada.



### Provox Life Stability Adhesive

El Stability Adhesive da un soporte firme para los pacientes que hablan con frecuencia, tienen un estoma profundo o hablan con manos libres.



## Esenciales de cuidado

### Provox Adhesive Remover

Para ayudar a quitar el adhesivo

- Sin alcohol
- Hace más fácil quitar el adhesivo y los residuos



### Provox Silicone Glue

Mejora la adherencia entre la piel y el adhesivo.



### Skin Tac Wipe

Da una barrera pegajosa entre el adhesivo y la piel.



### Provox Cleaning Towel

Para limpiar la piel antes de poner un adhesivo.

- Limpie y quite la grasa de la piel
- A base de alcohol y sin perfume



### Provox Skin Barrier

Para dejar una capa protectora sobre la piel.

- Sin alcohol
- Use después de limpiar la piel y antes de aplicar un adhesivo
- Puede ayudar a mejorar el sellado adhesivo



Este texto no reemplaza ni representa el contenido completo de las instrucciones de uso (IFU) ni la información del proveedor que receta para los productos en este texto. Por lo tanto, antes de recetar o de usar cualquiera de los productos incluidos en este texto, repase todo el contenido de las IFU correspondientes o la información del proveedor que receta. Para consultar las IFU, visite [www.atosmedical.us](http://www.atosmedical.us)

Atos Medical Inc

5000 South Towne Drive, Suite 200, New Berlin, WI 53151-7956 USA | 1 800 217 0025 | [info.us@atosmedical.com](mailto:info.us@atosmedical.com) | [www.atosmedical.us](http://www.atosmedical.us)

Atos and the Atos logo are trademarks of Coloplast A/S. ©2026-08 Coloplast A/S. All rights reserved. MC-2713ES, 072926